

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη

Σύστημα πρεσσοθεραπείας

Μοντέλο: POWER-Q1000 PLUS



"Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician"



Wonjin Mulsan Co., Ltd.
www.wonjininc.net

Περιεχόμενα

1. Όνομα προϊόντος, μοντέλο, περιγραφές	3
2. Χώρα, κατασκευαστής, διεύθυνση, τηλ. κέντρο	3
3. Προβλεπόμενη Χρήση	4
4. Σκοπός, ονομασία κάθε μέρους	4
5. Προφυλάξεις.....	5-8
6. Προετοιμασία πριν από τη χρήση	9
7. Τρόπος χρήσης	10
8. Επιμέλεια και διαχείριση	11
9. Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
10. Ετικέτα	13
11. Εγγύηση	15

1. Όνομα προϊόντος, μοντέλο, περιγραφές



Περιγραφή	
Όνομα προϊόντος	Σύστημα Πρεσσοθεραπείας
Μοντέλο	(Q1000 Plus)
Μέγεθος	260 X 200 X 125 (χιλ.)
Ονομαστική τάση	Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	25W
Προσαρμόσιμος Ώρα	0"- '30 πρακτικά
Μέγιστη πίεση	235mmHg±100k
Βάρος [αντλία]	2.0 κιλά

2. Χώρα, κατασκευαστής, διεύθυνση, τηλ κέντρο

- 1) Χώρα : Δημοκρατία της Κορέας
- 2) Κατασκευαστής: WONJIN MULSAN CO., LTD.
- 3) Διεύθυνση : 2F, 89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon, Korea.
Tel : +82-32-816-0552 Fax : +82-32-816-0557
[www .wonjininc.net](http://www.wonjininc.net)
- (4) τηλ Κέντρο : +82-32-816-0552

3. Προβλεπόμενη Χρήση

Το WHF-324 (POWER-01000 PLUS) προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας και ασθενείς στο σπίτι, οι οποίοι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, στη θεραπεία πολλών καταστάσεων, όπως: Πρωτοπαθές λεμφοίδημα, Τραύμα παρακολούθησης οιδήματος και αθλητικές κακώσεις, Οίδημα μετά την ακινητοποίηση, Φλεβικές ανεπάρκειες, Λεμφοίδημα.

4. Σκοπός, Όνομα κάθε μέρους

1) Σκοπός

Το σύστημα πρεσσοθεραπείας άκρων είναι ένα πνευματικό σύστημα εναλλασσόμενης πίεσης στα μανίκια επέκτασης για να βοηθήσει την κυκλοφορία του αίματος και να αποτρέψει θρόμβους αίματος ή φραγμούς.

2) Αντλία



3) Εξαρτήματα



5. Προφυλάξεις

-Προφυλάξεις για την ασφάλεια των χρηστών και την πρόληψη των υλικών ζημιών. Διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.



Προειδοποίηση

Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών, ο χρήστης ενδέχεται να υποστεί τραυματισμό ή θάνατο.



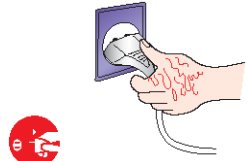
Προειδοποίηση

Σε περίπτωση μη τήρησης οδηγιών ο χρήστης μπορεί να υποφέρει από τραυματισμό ή περιουσία βλάβη.

	Αυτή είναι μια ένδειξη περιορισμού.
	Αυτή είναι μια ένδειξη για τη μη αποσυναρμολόγηση.
	Αυτή είναι μια ένδειξη για την αποσύνδεση του καλωδίου από την πρίζα.
	Αυτή είναι μια ένδειξη για να ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες.
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία παραγωγής
	Τύπος BF
	2 επιπέδων Μόνωση
	Σειριακός αριθμός



Προειδοποίηση

Οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη ή την εμμηνόρροια σίγουρα απαιτείται να χρησιμοποιούν μετά από διαβούλευση με το γιατρό. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση ή εμπόδιο στην κυκλοφορία του αίματος	
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν αντιμετωπίζετε φλεγμονή, λοίμωξη, πόνο άγνωστης προέλευσης ή αιμορραγία (εσωτερική ή εξωτερική) κοντά στο σημείο εφαρμογής.	
Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, αφαιρέστε την υγρασία από τα χέρια. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, ηλεκτρική διαρροή ή πυρκαγιά.)	
Ελέγξτε την κατάλληλη τάση που θα χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιήστε τη συσκευή. (Ο χρήστης μπορεί να καεί, να τραυματιστεί ή να πάθει ηλεκτροπληξία.)	
Μην τοποθετείτε τα βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Επίσης, μην το πιέζετε με τραπέζι ή καρέκλα. (Μπορεί . Προκαλέστε ηλεκτροπληξία, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή πυρκαγιά.)	



Προειδοποίηση

Μην μουλιάζετε τη συσκευή στο νερό επειδή είναι ηλεκτρικό προϊόν.	
Μην ριζετε τη συσκευή από ύψος	
Μην το χρησιμοποιείτε με σκοπό εκτός από μασάζ. Κρατήστε τα βρέφη και τα παιδιά μακριά από αυτήν τη συσκευή.	
Χρησιμοποιήστε εσώρουχα ή αθλητικά εσώρουχα για να μην αγγίζετε απευθείας στο δέρμα με τις μανσέτες ή το μαξιλάρι.	
Εάν αισθανθείτε πόνο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε.	
Εάν αυτή η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή αποτύχει να λειτουργήσει, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε την κύρια μονάδα αυτής της συσκευής. Μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή κριτικής επιτροπής στον χρήστη.	



Προφυλάξεις

Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, παραμείνετε ακίνητοι και μην επιχειρήσετε να περπατήσετε ή να μετακινηθείτε τριγύρω.	
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή εντός 20 λεπτών όταν τη χρησιμοποιείτε μία φορά. (Αρχικά, ξεκινήστε από τα 5 λεπτά, και να αυξήσει το χρόνο σιγά-σιγά consuding σωματική σας δύναμη. *Εάν το χρησιμοποιείτε συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει το μη επιθυμητο αποτέλεσμα	
Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε σε κρύες περιοχές. *Η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη συσκευή αφού τη χρησιμοποιήσετε τρία ή τέσσερις φορές στο επίπεδο του Low-Medium-High	
Προσέξτε ο εύκαμπτος σωλήνας αέρα να μην είναι τσακισμένος ή λυγισμένος.	
Προσοχή σε μηχανήματα και εργαλεία που δέχονται ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει η αιτία δυσλειτουργίας μηχανημάτων και εργαλείων.	

6. Προετοιμασία πριν από τη χρήση

- 1) Επιλέξτε το κατάλληλο μανίκι ή μπότα για να βάλετε.
- 2) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κάτω όπως στην εικόνα.



- 3) Φορέστε το μανίκι ή τη μπότα .



- 4) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο κύριο σώμα.



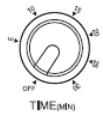
Μέθοδος σύνδεσης φερμουάρ επέκτασης

- Το φερμουάρ επέκτασης είναι ένα προαιρετικό στοιχείο που αυξάνει το μέγεθος της μανσέτας ποδιών.
- Χρησιμοποιήστε μετά τη σύνδεση φερμουάρ επέκτασης μεταξύ φερμουάρ των μανσέτες ποδιών με εικόνα.

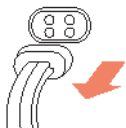
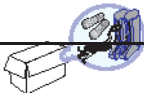


Φερμουάρ επέκτασης (A/L) Επέκταση Σύνδεση φερμουάρ . Alte: επέκταση , zip ανά σύνδεση

7. Τρόπος χρήσης

1. Τοποθετήστε το φισ στη πρίζα. Ελέγξτε την καταλληλότητα που θα χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιήστε τη πρίζα.	
2. Ρυθμίστε σωστά την πίεση. - Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για πρώτη φορά, Μετακίνηση από "MIN" έως "MAX" ομαλά. - Ρυθμίστε σωστά τη δύναμή του, επειδή η πίεση όταν χρησιμοποιείτε τη μόνη μία πλευρά θα γίνει ισχυρότερη από αυτή όταν χρησιμοποιείτε και τις δύο πλευρές.	
3. Ρυθμίστε το χρόνο που θα χρησιμοποιηθεί. όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή για τον ασβέστη, αυξήστε το χρόνο σιγά-σιγά αρχίζοντας από πέντε[5] ή δέκα[10] λεπτά.	
4. Ενεργοποιήστε το Power. Πατήστε το "ON" κουμπί.	

Κατά το κλείσιμο της χρήσης

Μετά από ένα ή δύο λεπτά ή κλείνοντας τη χρήση, ο αέρας θα αποφορτιστεί. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μανσέτα, και τραβήξτε το φισ 	Αφαιρέστε το βύσμα από το σώμα. [Προσοχή: Όταν τραβάτε το φισ ή το βύσμα τροφοδοσίας, τραβήξτε το κρατώντας το φισ και όχι το καλώδιο 
Αποσυνδέστε το βύσμα του εύκαμπτου σωλήνα από τις μανσέτες 	Μετά τη χρήση της συσκευής. Κρατήστε το σώμα και τα μέρη του στο κουτί. 

8. Αποθήκευση και διαχείριση

Όλες οι μανσέτες δεν επισκευάζονται ως ανταλλακτικά χρήσης. Να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην τοποθετείτε τη μανσέτα κοντά στα αιχμηρά αντικείμενα όπως φούρνους, βελόνες, ψαλίδι κ.λπ.	
Κρατήστε το στο ξηρό ρiace όπου δεν υπάρχει νερό ή υγρασία	
Μην πλένετε τις μανσέτες στο πλυντήριο και μην τις βυθίζετε στο νερό. Οι μανσέτες μπορούν να σκουπιστούν απαλά με μια υγρανθείσα πετσέτα ή πανί. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιο απορρυπαντικό	
Μην διατηρείτε τη συσκευή σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία το χειμώνα [Μπορεί να καταστραφεί]	
Αν επιθυμείτε να φυλάξετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατηρήστε την στη συσκευασία της.	

Συνθήκες Λειτουργίας και φύλαξής του

1. Λειτουργήστε και διατηρήστε τη συσκευή σε καθαρό μέρος σε κανονική θερμοκρασία
(Θερμοκρασία: 10° C - 40°C, Υγρασία: 30% - 85%).
2. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

9. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα	Έλεγχος
Όταν δεν λειτουργεί	*Ελέγξτε αν το έχετε συνδέσει . *Ενεργοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας. *Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο καλώδιο/ή το φισ(Ελέγξτε τη τάση της πρίζας). *Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει το χρονόμετρο
Όταν υπάρχει ένας περίεργος ήχος όπως διαρροή αέρα	* Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο τσακισμένο καλώδιο στον εύκαμπτο σωλήνα και το συνδετικό. *Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει το Συνδετικό με τη συσκευή. * Ελέγξτε εάν οι σωλήνες πιέζονται ή λυγίζουν.
Όταν ο αέρας δε μεταφέρεται στις μανσέτες και τη ζώνη μέσης/κορμού ή όταν δεν υπάρχει πίεση	*Ελέγξτε εάν έχετε συνδέσει το συνδετικό με τη συσκευή. *Ελέγξτε εάν έχουν τοποθετηθεί βαριά υλικά στον εύκαμπτο σωλήνα ή είναι λυγισμένοι. *Ελέγξτε αν η συνδετική σωλήνα είναι σωστά συνδεδεμένη με τη ζώνη
Όταν το ο αέρας μπαίνει κανονικά στις μανσέτες/μανίκια και ακούγεται ήχος διαρροής	*Ελέγξτε πού υπάρχει διαρροή αέρα στις μανσέτες. Εάν δεν υπάρχει διαρροή, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά. Ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά. (Τα μανίκια και η ζώνη δεν καλύπτονται από την εγγυηση.)

10. ΕΤΙΚΕΤΑ

Compressible Limb Therapy System			
MODEL NAME		WHF-324(POWER-Q1000 PLUS)	
RATED SUPPLY VOLT	120V~	SUPPLY FREQUENCY	50/60Hz
POWER CONSUMPTION	25W	MAXIMUM PRESSURE	(235mmHg $\pm$ 10%)
 MFG. DATE  SERIAL NUMBER			
 In order to use the device for a long time, please read this user's instruction manual carefully before using it.  			
INTENDED USE			
The device is intended for use by medical professionals and patients at home, who are under medical supervision, in treating many conditions, such as: Primary lymphedema, Edema following trauma and sport injuries, Post-immobilization edema, Venous insufficiencies, Lymphedema.			
U.S. Agent Global wound care products Inc 309 west park Ave, suites 5, Long Beach NY 11561, USA Tel)516-376-2537		 WONJIN MULSAN CO., LTD. Wonjin Mulsan Co., Ltd. Tel:82-32-816-0552 Fax:82-32-816-0557 89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon, Korea	

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αντλία : 1Έτος
Μανίκια/ζώνη (καταναλωτικά αγαθά)
: 3Μήνες

Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί σχετικά με το γεγονός ότι το κόστος εξυπηρέτησης θα χρεωθεί ακόμη και εντός της περιόδου εγγύησης εάν ο καταναλωτής ζητήσει την υπηρεσία λόγω απροσεξίας του ή εάν δεν εντοπιστούν ελαττώματα σε αυτό.

Η εγγύηση δεν ισχύει για:

Σε περίπτωση βλαβών που οφείλονται σε λάθος του καταναλωτή (Όταν οι βλάβες οφείλονται σε απροσεξία του καταναλωτή ή λάθος επισκευή)

Όταν η βλάβη οφείλεται σε λανθασμένη χρήση της ηλεκτρικής ικανότητας.

Όταν το σφάλμα παρουσιάζεται επειδή ο καταναλωτής έχει προκαλέσει πτώση της συσκευής κατά τη μεταφορά ή την εγκατάσταση.

Όταν το σφάλμα συμβαίνει επειδή ο καταναλωτής έχει χρησιμοποιήσει την κατανάλωση και τα προαιρετικά αγαθά που δεν ορίσαμε.

Όταν η βλάβη παρουσιάζεται επειδή άλλες εταιρείες ή επισκευαστής έχει επισκευάσει το εν λόγω προϊόν.

Όταν το σφάλμα προκύπτει επειδή ο καταναλωτής έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν σε απαγορευμένο χώρο (εξωτερικός χώρος) ή πέρα από την αρχική χρήση, επειδή ο καταναλωτής έχει αποσυναρμολογήσει, εναλλάσσει και επισκευάσει κατά την κρίση του.

Όταν ο καταναλωτής δεν έχει συμμορφωθεί με τα θέματα που απαιτούν προσοχή σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών (Διαβάστε προσεκτικά τα θέματα που απαιτούν προσοχή.)

Άλλες περιπτώσεις

Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, ζημιά από θαλασσινό άνεμο, ζημιά από πλημμύρα, βροντή, κεραυνό, σεισμό κ.λπ.)

Όταν τα καταναλωτικά αγαθά εξαντλούνται ή η περίοδος εγγύησης έχει λήξει.

Διανομή: alfacare.gr



Κατασκευαστής: Wonjin Mulsan. Co, Ltd.

<http://www.wonjininc.net>

2st. 89, Geomdan-ro), Seo-gu, Incheon, Rep. of Korea

τηλ: 82-32-816-0552